


# מד חום לאוזן

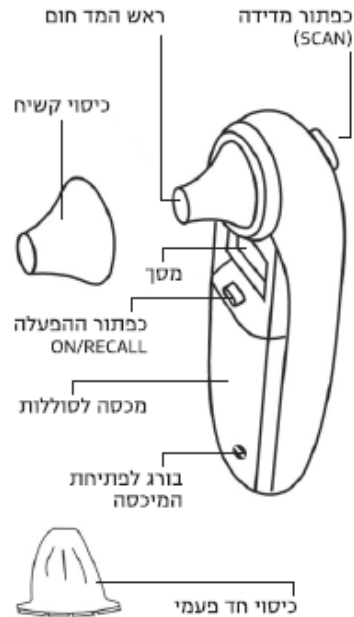

## הוראות שימוש

מד חום אינפרא אדום לאוזן הוא מכשיר המסוגל לבצע מדידת טמפרטורת גוף האדם באמצעות טכנולוגיית אינפרא אדום, מדידה בטוחה ומהירה (שניה אחת) דרך האוזן.

## נתונים כלליים

המד חום לאוזן עומד בתקנים הבאים: EN12470-5:2003 Clinical thermometers – Part 5: Performance of infrared ear thermometers (with maximum device).

IEC 60601-1:1998

IEC 60601-1-2:2001

טווח מדידת הטמפרטורות הוא 34 מעלות צלזיוס עד 44 מעלות צלזיוס. האות L תופיע על הצג כאשר הטמפרטורה נמוכה מ-34°C. האות H תופיע על הצג כאשר הטמפרטורה גבוהה מ-44°C. יש לאחסן את המכשיר במקום יבש, נקי מאבק ומוצל.

מקור מתח: 2 סוללות אלקאליין 1.5 וואט (AAA) מספיקות לכ-4000 מדידות.

מידות: 40 מ"מ × 70 מ"מ × 140 מ"מ. משקל: 81 גרם.

## בדיקה עצמית

יש ללחוץ על כפתור ההפעלה RECALL\ON על מנת להפעיל את המכשיר, על הצג יופיעו כל אותות התצוגה למשך שניה אחת (ציור 1).

## אזהרות

1. יש לשמור על תעלת האוזן נקייה לפני הבדיקה, אחרת התוצאות עלולות להיות לא מדויקות.

- לכל בדיקה יש להשתמש בכיסוי חד פעמי חדש, אחרת התוצאה יכולה להיות לא מדויקת.
- סימן אוזן על צג המכשיר - המכשיר מוכן לבדיקה.
- פרק הזמן בין המדידות - לפחות 12 שניות.
- אין לגעת בראש המדחום.
- במידה ואין שינוי בצג בלחיצה על כפתור ההפעלה RECALL\ON, יש להוציא את הסוללות מהמכשיר ולהחזירם.
- אין להשתמש במכשיר בזמן דלקת באוזן.

## הוראות ניקיון ואחזקה

השתמש בפד או ב בד כותנה טבול באלכוהול 70% כדי לנקות את ראש המדידה של המכשיר. וודא שהנוזל לא יחדור בשום צורה לפני המכשיר. אין להשתמש בחומרי ניקוי מלבד אלכוהול 70%. אין לטבול את המכשיר במים או בחומר ניקוי. יש לשמור את המכשיר במקום יבש.

## שים לב:

על מנת להימנע מהפצת חיידקים יש להשתמש בכל מדידה בכיסוי חד פעמי חדש. לפני השימוש יש לבדוק ולוודא כי הכיסוי החד פעמי מורכב כראוי (הציור מימין)




לא נכון




נכון

### מדידת חום הגוף בתעלת האוזן:

1. לחץ על כפתור ההפעלה RECALL\ON להפעלת המכשיר. יישמע צפצוף ועל הצג ידלקו כל אותות התצוגה (צויר 1) כשבצג יופיע 00.0 (צויר 2) המכשיר מוכן למדידה.

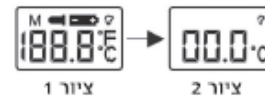


2. לפני המדידה יש ליישר את תעלת האוזן ע"י ידי משיכת האוזן החיצונית בעדינות למעלה ולאחור ליצור מעבר חופשי לעור התוף. ■ לילדים מתחת לגיל שנה - יש למשוך את האוזן ישר לאחור ■ מגיל שנה ומעלה - יש למשוך את האוזן למעלה ולאחור.

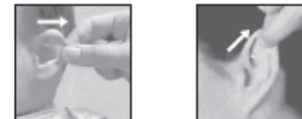


3. הסר את הכיסוי הקשיח וכסה את ראש המדחום בכיסוי החד פעמי, הכנס את ראש המדחום לאוזן (כמה שיותר עמוק) לאחר משיכת האוזן בעדינות לאחור (לפי ההנחיות בסעיף 2). לחץ לחיצה קצרה על כפתור המדידה SCAN ושחרר. השאר את המכשיר באוזן עד להישמע הצפצוף (כשניה אחת) ורק אז להוציא את המכשיר מהאוזן. על הצג תופיע הטמפרטורה הנמדדת.

4. מדידה חוזרת: אם מודדים שוב, המתן לסימן האוזן שיופיע בפינה הימנית למעלה של הצג ואז פעל שוב עפ"י הנאמר בסעיף 3. שים לב: אסור שהזמן בין המדידות יהיה קצר מ-12 שניות - אחרת התצוגה לא תשתנה. 5. שלפית זכרון: לחץ על RECALL\ON, 10 הזכרונות האחרונים (מספרים 0-9) יופיעו על הצג (ראה צויר 3 וצויר 4).

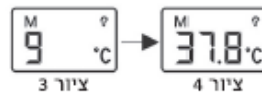

6. הצג יראה ER 1 ולא יציג את הטמפרטורה, כאשר טמפרטורת הסביבה נמוכה מ-10 מעלות צלזיוס או מעל ל-35 מעלות צלזיוס.

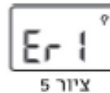

7. כיבוי המכשיר: המכשיר יכבה אוטומטית אם לא השתמשו בו במשך דקה אחת.

### אזהרות:

במקרה של ספק בקריאת המדידה, בדוק אם האוזן נקייה וראש המדחום נקי ונסה שנית. אפשר לנסות לנשוף אויר על ראש המדחום. אחסן את המכשיר במקום יבש, נקי מאבק ומוצל.



ניתן לנקות את המכשיר בעזרת צמר גפן יבש.

### החלפת סוללה

כאשר הסוללות חלשות, יופיע על הצג סימן סוללה. יש להחליף סוללה. יש להשתמש בדיוק באותו סוג סוללה כפי שסופקה על ידי היצרן ולשים לב לקוטביות. כדי למנוע דליפת הסוללה יש להוציאה מהמכשיר אם לא נעשה בו שימוש יותר מחצי שנה.

### האחריות הינה לשנה כנגד הצגת חשבונית קניה של בית עסק.

יצרן: הנגזו הואן, סין.  
מיוזבא ע"י: מ. פיינגרש ושות' בע"מ,  
הבנאי 29 חולון, טל: 03-5581666.  
www.mfcl.co.il