



Sveg
modèle 1 moteur

Le repos, le confort,
la relaxation
et l'aide au relevage.
Une gamme fonctionnelle
à vivre au quotidien.



Kymi
modèle 2 moteurs

Jamsa
modèle 1 moteur
avec fonction
"dos au mur"



CE

Kymi




*Fauteuil de repos releveur
équipé de deux moteurs :
dossier et repose-jambes*

Dissociez l'inclinaison du dossier de celle du repose-jambes et trouvez la position idéale.


Inclinaison du dossier seul

Possibilité de remonter le dossier tout en laissant le repose-jambes allongé

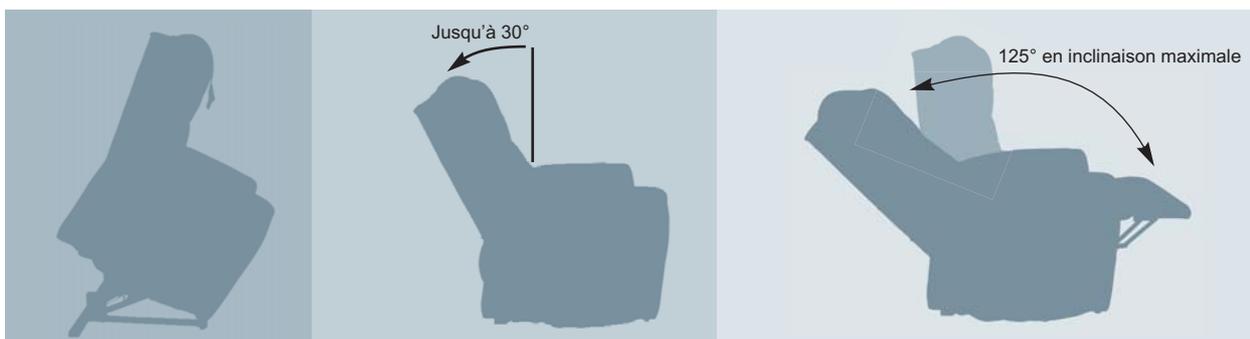

Position "aide au relevage"

Allongement complet

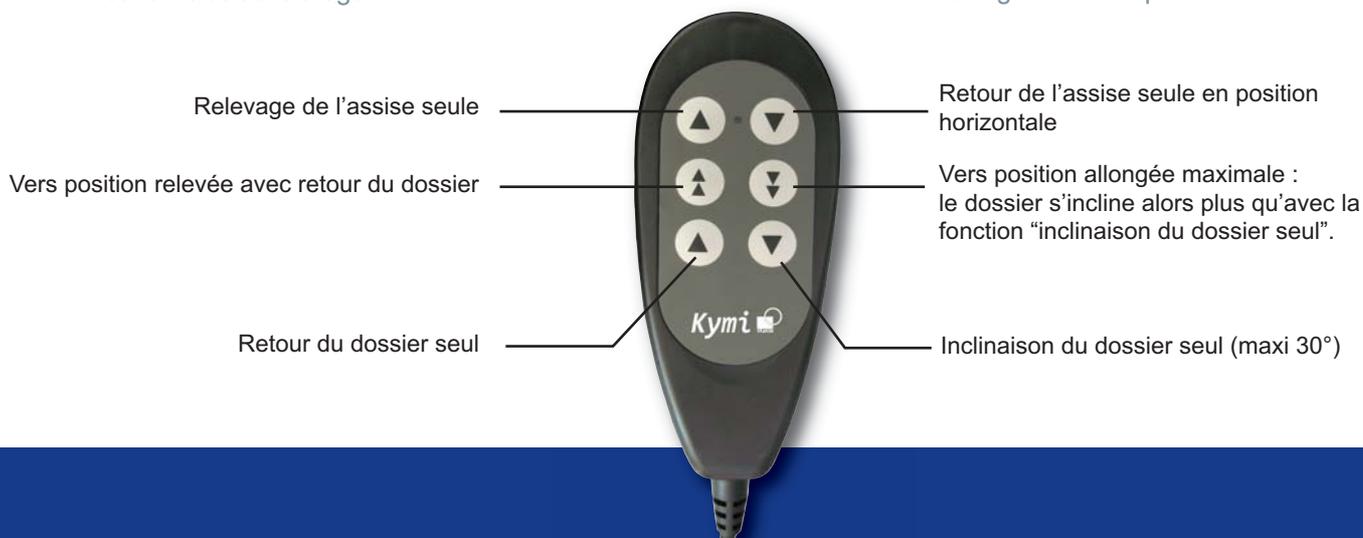

Jamsa

*Fauteuil de repos releveur
à un moteur avec fonction
"dos au mur"*

*Deux roulettes avant permettent de déplacer
facilement le fauteuil si nécessaire,
sans avoir à le porter complètement.*




**La translation vers l'avant du "bloc assise"
avant la phase d'inclinaison du dossier évite
de devoir écarter le fauteuil du mur pour l'incliner.**

Laisser 8 cm entre
le dossier et le mur

Le fauteuil avance automatiquement de
37 cm avant que le dossier ne s'incline

Un espace d'environ 5 cm restera
visible en position allongée

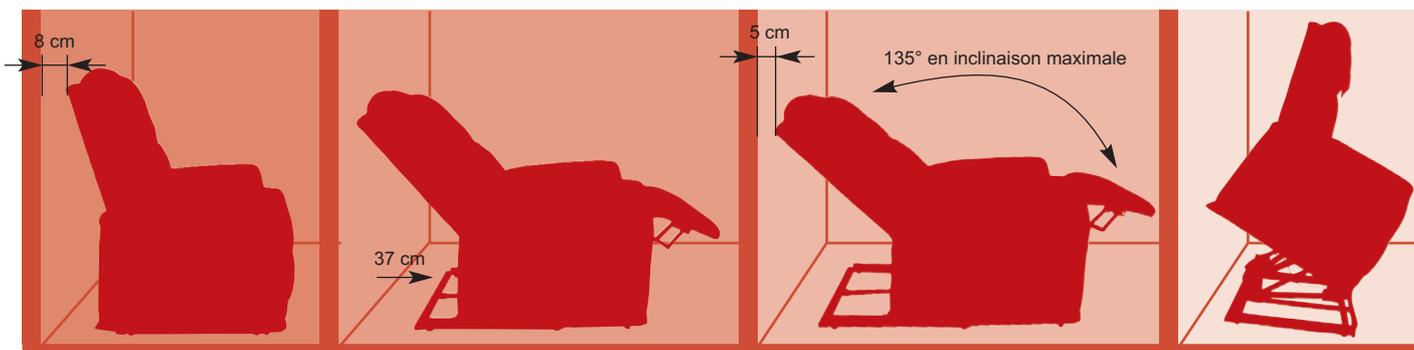

Position "neutre"

Allongement complet

Position "aide au
relevage"

Vers position relevée

Vers position allongée

*Une télécommande simple
enchaînant automatiquement
les phases de translation et
d'inclinaison.*



Fauteuil de repos releveur à un moteur.



Grande poche de rangement



Chocolat Bleu
(tissu velours polyester)

SYNTHESE DES CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

	Largeur d'assise	Profondeur d'assise	Hauteur d'assise (horizontale)	Hauteur du dossier	Largeur hors-tout	Hauteur totale dossier droit	Longueur hors-tout mini/maxi	Poids total du fauteuil	Poids maximum admissible
Sveg 1 moteur	55 cm	50 cm	50 cm	70 cm	76 cm	112 cm	90 cm / 165 cm	58 kg	140 kg
Kymi 2 moteurs	51 cm	46 cm	50 cm	70 cm	76 cm	112 cm	90 cm / 165 cm	58,5 kg	140 kg
Jamsa 1 moteur avec fonction "dos au mur"	55 cm	50 cm	53 cm	70 cm	75 cm	115 cm	92 cm / 166 cm	69 kg	140 kg

A noter : chacun de ces 3 modèles a la possibilité de revenir en position "0" en cas de coupure électrique, grâce à une pile (non fournie) à placer à l'arrière de la structure du fauteuil à côté du moteur (emplacement prévu pour la pile).

DUPONT MEDICAL

BP 19 - ZAC de Ban la Dame - 92 rue du train à fil
54390 FROUARD (France)
Tel. +33 (0)3 83 495 495 - Fax. +33 (0)3 83 495 496
<http://www.dupont-medical.com>



Toutes les photos sont non contractuelles et certains composants peuvent évoluer pour des impératifs de fabrication ou d'amélioration.

ADAGE®
Une marque de DUPONT MEDICAL